

# GEZATONE

## МАССАЖЕР «ДОМАШНЯЯ МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА» GEZATONE M8810



**РЕЦЕПТ  
СОХРАНЕНИЯ  
МОЛОДОСТИ**

**10**

минут  
в день

## РЕЦЕПТ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ

**ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  
MEZOLIGHT M8810**

Маленький компактный массажер для лица MezoLight mini Gezatone – это уникальный комплекс по уходу за кожей лица, шеи и декольте, который подарит вам первоклассный уход в домашних условиях.

Прибор MezoLight Mini - это комбинация, **ПЯТИ УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА**, чья результативность доказана косметологами во всем мире!

**10**минут  
в день

## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

### 5

### МЕТОДИК ВОЗДЕЙСТВИЯ

- МЕЗОПОРАЦИЯ
- ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ
- МИОСТИУЛЯЦИЯ ЛИЦА
- БИОТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
- ХРОМОТЕРАПИЯ



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

1

**МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - МЕЗОПОРАЦИЯ**

Аппаратная процедура, во время которой активные компоненты коктейлей проникают глубоко в кожу, как при мезотерапии, но при этом кожные покровы остаются абсолютно не поврежденными. При мезопорации эффект появляется намного быстрее, чем при мезотерапии, изменение цвета лица и текстуры кожи Вы видите сразу после первого воздействия.



мезопорация

мезопорация

эпидермис


дерма

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

1

МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - МЕЗОПОРАЦИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

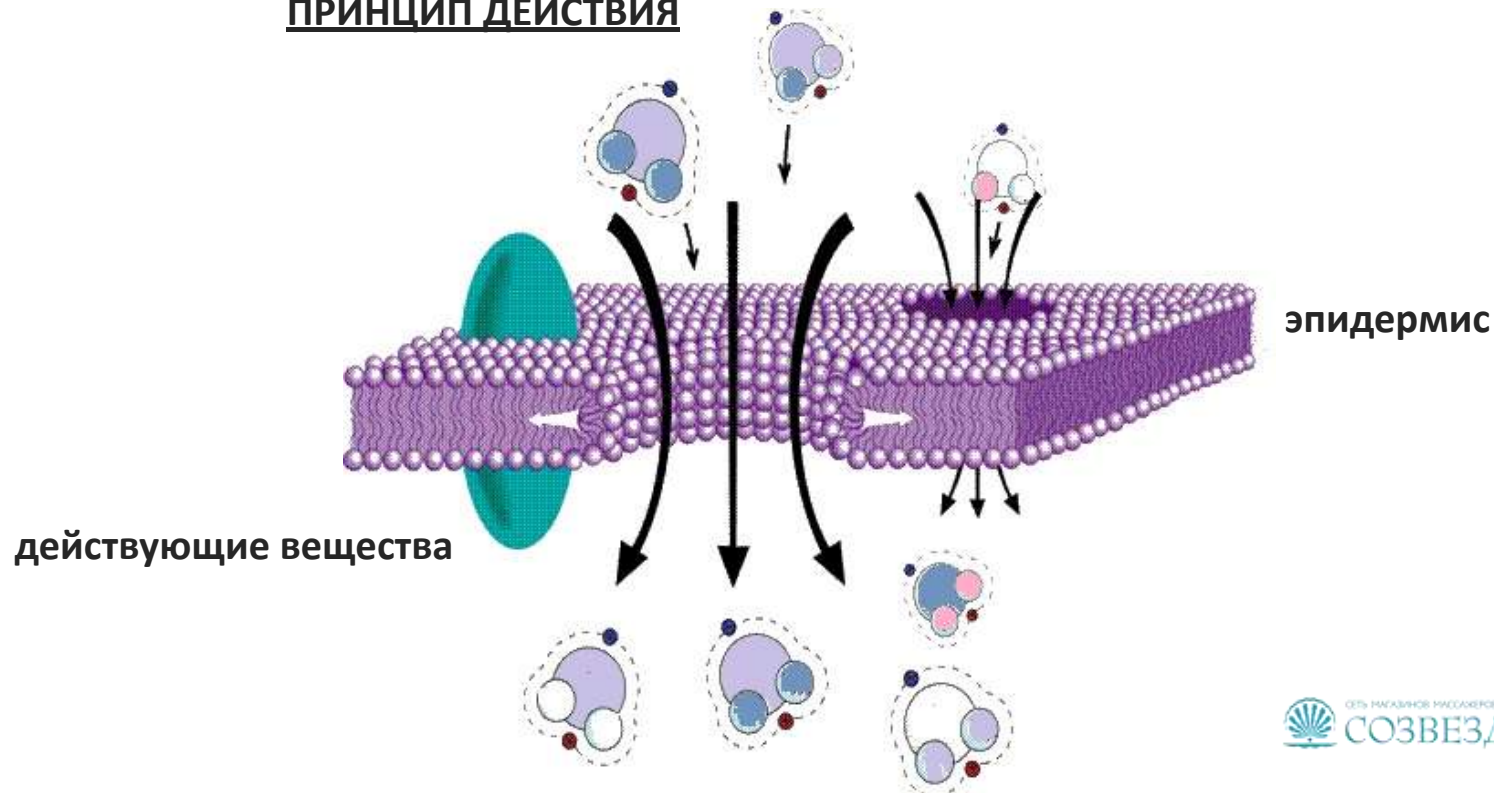

## 2

**МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ**

Электропорация используется в медицине и косметологии более 30 лет. За счет воздействия на клетки моделированным электроимпульсным током открываются каналы клеточных мембран через которые в клетки кожи проникают активно действующие вещества, стимулирующие метаболизм, процессы синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.



## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

## 3

**МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ –  
МИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА**

- Электромиостимуляция (ЭМС) деликатно стимулирует мышечные сокращения, заставляя лицевые мышцы работать.
- Усиливаются обменные процессы и кровообращение, что улучшает состояние кожи.
- **Результат** – укрепление мышц и подтяжка кожи лица, коррекция овала и укрепление тонуса кожи.
- Обновленная кожа становится более подтянутой и эластичной, морщины разглаживаются, контур лица подтягивается.

## 4

**МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ –  
БИОТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ**

- Биотоки высокой частоты оказывают действие на кожу, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды, создавая стойкий тонизирующий лифтинг-эффект.
- Воздействие на кожу биотоков приводит к возникновению ощущения тепла, усилению кровообращения, стимулирует обменные процессы в клетках кожи, выведение токсинов и выработку коллагена.
- Биотоки используются для нехирургической коррекции возрастных изменений овала лица, разглаживания морщин, устранения отеков.



**ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810**
**5**
**МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ – ХРОМОТЕРАПИЯ**

*Хромотерапия восстанавливает кожу изнутри!*

Цвет и длина волны	Действие	Для какого типа кожи	Результат
<b>Красный цвет</b> 620 nm ( $\pm 10$ nm)	стимулирует клетки, активизирует кровообращение и несет в себе тепло и заряд энергии	для дряблой, атоничной и уставшей кожи с возрастными изменениями	активизирует процессы выработки энергии и стимулирует клеточный метаболизм, восстанавливая цвет лица и тонизируя кожу
<b>Голубой цвет</b> 415 nm ( $\pm 10$ nm)	стимулирует иммунитет кожи, успокаивает	для раздраженной и склонной к куперозу, для жирной кожи	успокаивает кожу, противовоспалительный эффект, уменьшение расширенных пор
<b>Оранжевый цвет</b> 590 nm ( $\pm 10$ nm)	воздействует непосредственно на клетки дермы – фибробласты	для зрелой, сухой кожи и для профилактики преждевременного старения	стимулирует процессы выработки коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, усиливает собственную энергию кожи, способствует увлажнению и разглаживанию морщин
<b>Розовый цвет</b> 700 nm ( $\pm 10$ nm)	восстанавливает кожу изнутри, возвращает свежий и здоровый вид	подходит для кожи со сниженным тонусом	делает кожу более эластичной. Великолепно улучшает цвет лица

## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

### СВОЙСТВА

- Увеличение скорости и глубины проникновения препаратов
- Усиление проницаемости кожи и клеточных мембран
- Улучшение состояния и внешнего вида кожи
- Транспорт активных компонентов глубоко в кожу без повреждений и риска
- Стимуляция синтеза молодого коллагена и эластина



## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата
- Нарушение целостности кожных покровов, травмы и дерматологические заболевания (экзема, дерматит)
- Острые воспалительные процессы, гнойнички
- Использование электрокардиостимулятора
- Период беременности
- Онкологические заболевания



## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

## ВЫГОДЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

- Полное преображение кожи всего за 10 минут
- **Абсолютно безболезненно и безопасно**
- Удобно работать на любом участке лица, подходит для любого типа кожи
- **Нетравматично**, отсутствие восстановительного периода
- Превосходит традиционные уходы в десятки раз экономично, проникновение от 85 до 99% косметики



10

минут  
в день

## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС

- Процедуры рекомендуется проводить 3 раза в неделю, курсом 20 процедур.
- Время одной процедуры составляет 10-15 минут.
- Перед проведением процедуры необходимо нанести на кожу проводящий гель на водной основе.
- Чтобы усилить эффект, рекомендуется использовать специально разработанные проводящие гели на водной основе, нанося под них активные косметические сыворотки,
- Проводить процедуру по сухой коже запрещено!
- После процедуры не удаляйте остатки коктейля с кожи, дайте возможность препарату впитаться.

**10-15**

минут

в день

## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

**ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР**

- Разглаживаются мелкие и мимические морщины
- Уменьшается глубина крупных морщин
- Повышается тонус, упругость и эластичность кожи
- Подтягивается овал лица, исчезает мышечное обвисание
- Уменьшается спазм мимических мышц, которые провоцируют деформацию овала лица и появление морщин
- Значительно возрастает проникновение активных ингредиентов косметических средств в глубокие слои кожи
- Увеличивается количество собственных волокон коллагена и эластина



## ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА GEZATONE M8810

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Сыворотка для лица  
с гиалуроновой кислотой  
"ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 2%",  
50мл. Beauty Style



Сыворотка для лица с коллагеном  
"ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА",  
50мл. Beauty Style



Коктейль  
для ревитализации кожи лица  
MESODERM, 5мл. (упак. 10шт.)



Коктейль "SuperLift"  
MESODERM, 5мл (10 шт)



Гель активный  
"Ультралифт",  
300 мл. Beauty Style



Активный гель  
с экстрактом икры  
120 гр. Beauty Style

# GÉZATONE



**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

 <http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>

 <https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://vk.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>